

The Next Level

Eppendorf Conical Tubes de 25 ml con tapón de rosca y SnapTec™

Descubra nuestros nuevos Eppendorf Conical Tubes de 25 mL

Con los nuevos tubos cónicos Eppendorf Conical Tubes de 25 mL, llevamos los tubos cónicos al siguiente nivel.


Cuando hay que preparar, centrifugar, mezclar o almacenar volúmenes de muestras mayores de 15 mL, pero mucho menores que 50 mL, a los investigadores a veces no les queda otra opción que usar tubos cónicos tradicionales con tapón de rosca, con una capacidad de 15 mL o 50 mL. Los Eppendorf Conical Tubes de 25 mL con tapón de rosca o con la innovadora tapa SnapTec™ ponen fin a este dilema.

Los materiales vírgenes, y la fabricación sin agentes plastificantes ni biocidas garantizan una integridad máxima de las muestras. También se garantizan una solidez del centrifugado g-Safe® de hasta 17.000 x g*, la hermeticidad de la tapa de -86 °C hasta 100 °C*, y una visibilidad óptima de las muestras y los pellets.



> ¿Quiere saber más sobre los tubos de 25 mL?

Haga clic o escanee para acceder a: www.eppendorf.com/25mL

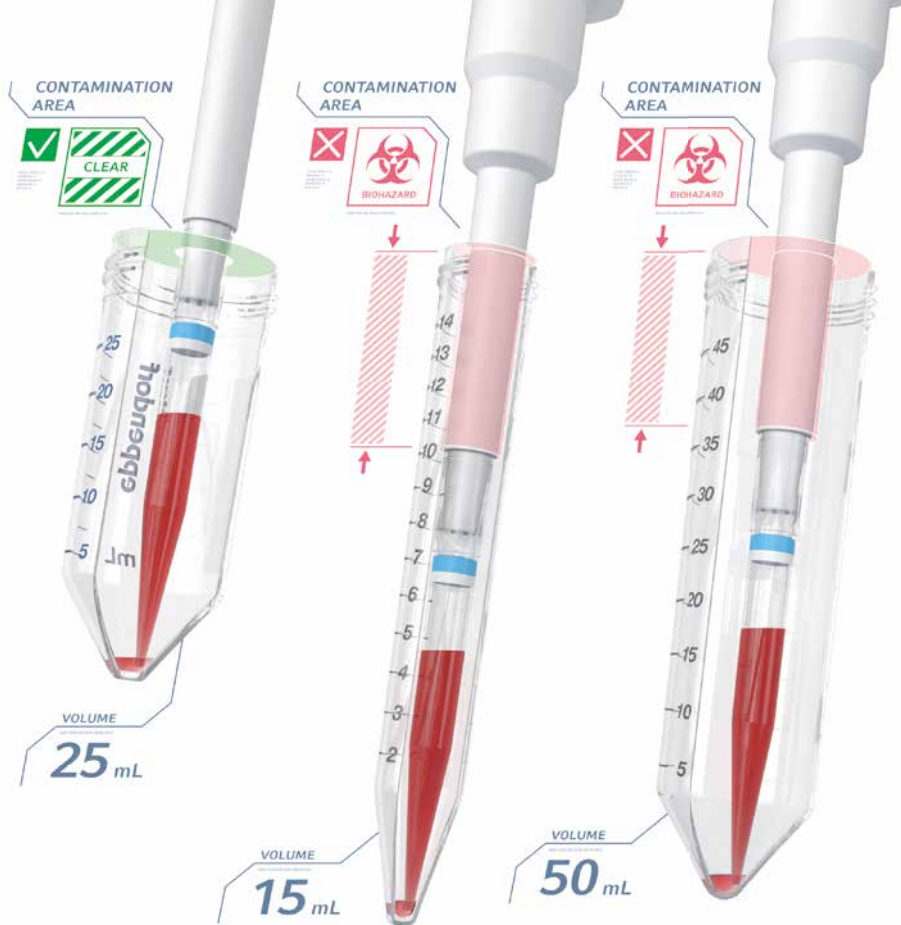

Menor riesgo de contaminación

Menor altura - más seguridad


Gracias a la altura del tubo, aproximadamente un 20 % menor, la profundidad a la que se inserta la pipeta en el tubo es mucho menor que en los tubos cónicos de 15 y 50 mL. De este modo, se reducen las posibilidades de que el cono de la pipeta toque la pared interior del tubo y de que se produzca contaminación cruzada entre el tubo y el sistema de pipeteo.

Manejo con una mano

Apertura y cierre fiable con el innovadora tapa SnapTec™

La versión de la tapa a presión del nuevo tubo cónico de 25 mL permiten abrirlo y cerrarlo con una sola mano para extraer o añadir líquido rápidamente. Esta tapa patentada es única en el mercado de tubos cónicos. Optimiza y acelera el procesamiento de soluciones de muestras, especialmente en protocolos con varios pasos.



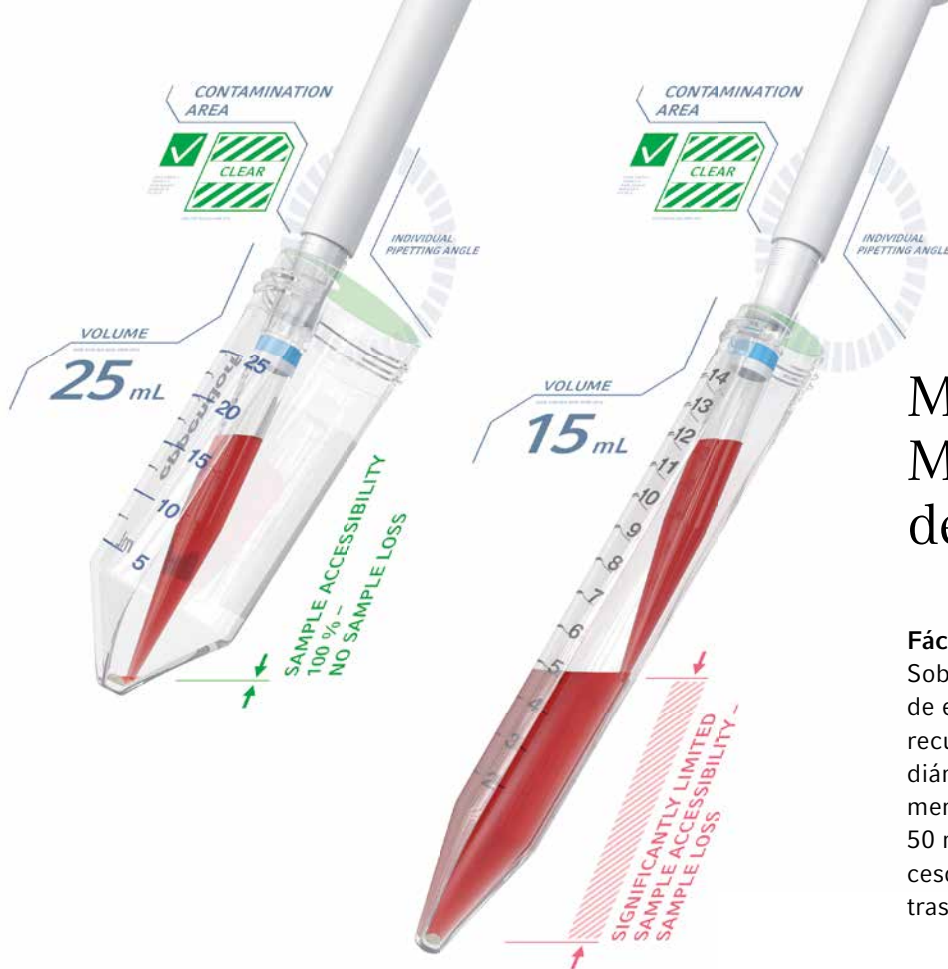

Menor altura – Mejor disponibilidad de muestras

Fácil acceso a volúmenes bajos

Sobre todo cuando se trabaja con volúmenes de entre 15 y 50 mL, a menudo no es posible recuperar la muestra completa. Al tener el mismo diámetro que los tubos cónicos de 50 mL y una menor altura que los tubos cónicos de 15 mL y 50 mL, este nuevo formato de tubo facilita el acceso a las muestras y una resuspensión de pellets tras la centrifugación más rápida.

Ahorre espacio

Flexibles y estables

El concepto modular de las cajas de almacenamiento Eppendorf Storage Boxes para tubos se complementa con la versión de 25 mL, con unas medidas exteriores compactas de 133 mm, compatible con los sistemas de racks de ultracongeladores. Su menor altura permite ahorrar espacio para almacenar hasta 9 tubos de 25 mL. Autoclavable para esterilización. La tapa transparente permite la comprobación de las muestras de manera rápida y fácil.



> Aplicaciones Nota 404 – «Recuperación de muestras total en los tubos cónicos Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes»
> Haga clic o escanee para acceder a: www.eppendorf.com/appnote404



Menor altura - mejor manejo

- > Al ser un ~20 % más bajo comparado con los tubos cónicos de 15 mL / 50 mL ayuda a evitar la contaminación y permite recuperar soluciones de muestras fácilmente
- > Ahorra espacio de almacenaje: pueden usarse cajas y racks para ultracongeladores de 3,5 pulgadas en vez del formato de 5 pulgadas que se necesita para los tubos cónicos de 15 y 50 mL

Implementable directamente

- > Al tener el mismo diámetro que los tubos cónicos de 50 mL se garantiza la integración inmediata en el entorno del laboratorio ya existente
- > Garantiza la hermeticidad del sellado de -86 °C hasta 100 °C *
- > Solidez del centrifugado hasta 17.000 x g *

Tapa Innovative SnapTec™

- > Tapas a presión con clip fiable para tubos cónicos
- > Protegidos por dos patentes técnicas
- > El tubo SnapTec es autoclavable *

**Manejo con una mano**

- > Facilita un procesamiento optimizado y más rápido de soluciones de muestras, especialmente en protocolos con varios pasos

* Por favor, acuda a las instrucciones de uso para más detalles (www.eppendorf.com/manuals): «Eppendorf Conical Tubes 25 mL, tapa a presión» y «Eppendorf Conical Tubes 15, 25 y 50 mL»

Información de pedidos **

Descripción	Núm. ped.
Eppendorf Conical Tubes de 25 ml con tapa SnapTec™	
Eppendorf Quality™, incoloro, 200 tubos, (5 bolsas x 40 tubos)	0030 118 405
PCR clean, incoloro, 200 tubos, (5 bolsas x 40 tubos)	0030 118 413
Estéril, libre de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y bacteriano, incoloro, 150 tubos, (6 bolsas x 25 tubos)	0030 118 421
Pack de inicio, PCR clean, 200 tubos, 4 soportes individuales, 6 adaptadores para centrífuga	0030 118 502
Eppendorf Conical Tubes de 25 mL con tapón de rosca	
Eppendorf Quality™, incoloro, 200 tubos, (4 bolsas x 50 tubos)	0030 122 410
PCR clean, incoloro, 200 tubos, (4 bolsas x 50 tubos)	0030 122 429
Estéril, libre de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y bacteriano, incoloro, 200 tubos, (8 bolsas x 25 tubos)	0030 122 437
Pack de inicio, PCR clean, 200 tubos, 4 soportes individuales, 6 adaptadores para centrífuga	0030 122 500

** Información de pedidos para piezas del sistema disponibles en nuestra página de Internet.

Un sistema de piezas completo

Centrifugación

Centrífugas con rotores para tubos cónicos de 50 mL:

Las dos variantes de adaptadores para tubos de 25 mL con tapas a presión (núm. ped. 5820 733 004) y tapones de rosca (núm. ped. 5820 734 000) permiten la centrifugación en cestillos



Almacenaje de muestras

Soporte de tubo individual:

Diseñado especialmente para pesar muestras en la báscula y para manejar muestras individuales. La hendidura de visibilidad permite observar el nivel de llenado en todo momento. (Núm. ped.: 0030 119 860)

Calentamiento y mezcla

Eppendorf ThermoMixer® C y Eppendorf ThermoStat™ C:

El adaptador para los tubos de 25 mL garantiza la compatibilidad con los Eppendorf SmartBlock™ de 50 mL (Núm. ped.: 5365 000 109)


Tube Rack de 25 mL:

Los racks Eppendorf para tubos cónicos de 50 mL también pueden usarse con los nuevos tubos de 25 mL. (Núm. ped.: 0030 119 835)

MixMate®:

Soporte para tubos 25/50 mL, para 4 tubos cónicos de 25/50 mL (Núm. ped.: 5353 040 156)


Caja de almacenamiento hechas con polipropileno:

Su menor altura permite almacenar en un espacio reducido hasta 9 tubos de 25 mL en una caja de almacenamiento Eppendorf Storage Boxes de 3,5 pulgadas (Núm. ped.: 0030 140 729)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com/25mL