



Aceleración

Acelere su trabajo con la Easypet® 3 de Eppendorf
y las nuevas pipetas serológicas



Experimente una nueva dimensión de control


Experimente una nueva dimensión de pipeteo electrónico con la Eppendorf Easypet® 3.

La Easypet 3 ha sido diseñada teniendo en cuenta los últimos desarrollos tecnológicos, así ahora usted controla la velocidad de pipeteo simplemente con las puntas de sus dedos, lo cual le permite experimentar un control más sensible del menisco. El potente motor proporciona un rendimiento eficiente para acelerar pipeteos de gran volumen. Además, también proporciona un máximo control para volúmenes más pequeños. La Easypet 3 tiene un ajuste de velocidad excelente que ofrece una opción de drenaje por gravedad optimizado que se puede aprovechar para dispensar líquidos con facilidad sin causar salpicaduras.

Pesando solamente 160 gramos, la ligera y bien equilibrada Easypet 3 ha sido diseñada teniendo en cuenta todos los requisitos ergonómicos para que su mano la pueda sujetar cómodamente, adaptándose a su forma para permitir un pipeteo sin fatiga. La Easypet 3 se puede utilizar con todos los tipos de pipetas serológicas y volumétricas con volúmenes de 0,1 a 100 mL.

Características adicionales del producto:

- > Ajuste suave de la velocidad de la bomba para un mejor control del menisco
- > La batería de polímero de litio ofrece un funcionamiento largo sin necesidad de recarga (6 horas de uso para 3 horas de carga)
- > El indicador del estado de la batería ayuda a garantizar que la Easypet 3 no pierda energía en pleno funcionamiento
- > El funcionamiento de la pipeta es posible durante la recarga
- > Adaptador de pipeta autoclavable para aplicaciones estériles
- > Cono de aspiración de inserción rápida para un intercambio sencillo de los filtros de membrana
- > El sistema de igualación de presión expulsa vapores aspirados antes de que entren en la Easypet 3, ayudando a eliminar la corrosión

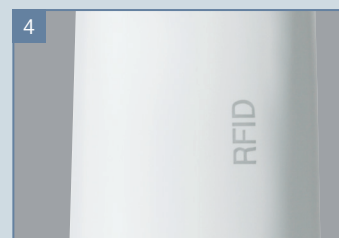

Control de velocidad y precisión

Ajuste de velocidad cómodo e intuitivo solamente con las puntas de los dedos. La nueva tecnología de válvula permite un control más sensible del menisco, proporcionando una mayor precisión.

Ergonomía

Diseño ligero, equilibrado y ergonómicamente mejorado que permite un trabajo sin fatiga. Siguiendo nuestro PhysioCare Concept®, nos esforzamos por mejorar su rutina diaria.

Indicador de estado de carga de batería

Unos LED retroiluminados brillantes proporcionan información óptica sobre la carga restante de la batería.

Equipado con RFID

Chip RFID y sistema Eppendorf TrackIT para un seguimiento de inventario y una documentación más fáciles.





Pipetas serológicas de Eppendorf

Experimente la misma calidad y comodidad en el manejo de líquidos que ha tenido su confianza durante décadas con el sistema más actual de Eppendorf:

Eppendorf Easypet® 3 y pipetas serológicas de Eppendorf.

Las nuevas pipetas serológicas de Eppendorf han sido diseñadas para trabajar en perfecta armonía con su Easypet 3. Las pipetas ofrecen unas graduaciones precisas superpuestas sobre el material de pipeta ultra claro que permiten una lectura rápida y fácil del volumen. Las pipetas están empaquetadas individualmente y embaladas en una caja dispensadora robusta para garantizar una calidad alta y consistente.

- > Graduaciones claras y precisas para una fácil determinación de volumen
- > Código de colores para una fácil identificación del tamaño de la pipeta
- > Embalaje amplio para garantizar un almacenamiento práctico y un uso fiable
- > El poliestireno virgen ultra claro cumple los requisitos de la norma USP Class VI
- > Nivel de garantía de esterilidad 10^{-6}
- > Ausencia certificada de pirógenos, ADN, RNAsas y DNAsas detectables, no citotóxico





»Easypet® 3 – nunca ha sido más fácil combinar velocidad, seguridad, precisión y comodidad.«



»Desarrollamos la Easypet 3 con nuestros usuarios siempre en mente. Queremos mejorar su trabajo diario combinando el control de ajuste de velocidad con nuestra nueva tecnología de válvula, que permite un control más sensible del menisco.«

Tobias David, Gestor de Proyecto, Desarrollo de Producto
Eppendorf Liquid Handling

Datos técnicos

Tipo de batería recargable	Polímero de litio
Capacidad	1.100 mAh/3,7 V
Tiempo de carga	~3 h
Número de dispensaciones	~2.000 (con una pipeta de 25 mL)
Peso sin batería recargable y pipeta	134 g (0,295 lb)
Alimentación eléctrica	
Entrada	100 V–240 V CA, ±10 %, 50 Hz–60 Hz, 0,5 A
Salida	5 V CC, 1,0 A

Información para pedidos

Descripción	N.º de pedido internacional
Eppendorf Easypet® 3 incl. fuente de alimentación y batería recargable de polímero de litio, soporte para la pared, soporte para estante (no disponible en EE.UU.), 2 filtros de membrana (no estériles) 0,45 µm	4430 000.018
Accesorios	
Filtro de membrana, estéril, 0,45 µm, paquete de 5	4421 601.009
Filtro de membrana, estéril, 0,2 µm, paquete de 5	4430 606.005
Batería recargable de polímero de litio para Easypet® 3 de Eppendorf	4430 605.009
Soporte para la pared	4430 604.002
Eppendorf TrackIT, compuesto por software y lector RFID	3903 000.014
Eppendorf Pipet Helper®	4423 000.010
Pipetas serológicas de Eppendorf estériles, libres de pirógenos, ADN, RNAsas y DNAsas detectables, no citotóxicas	
■ 1 mL, amarillo, 800 unidades (4 bolsas × 200 uds.)	0030 127.692
■ 2 mL, verde, 600 unidades (4 bolsas × 150 uds.)	0030 127.706
■ 5 mL, azul, 400 unidades (4 bolsas × 100 uds.)	0030 127.714
■ 10 mL, naranja, 400 unidades (4 bolsas × 100 uds.)	0030 127.722
■ 25 mL, rojo, 200 unidades (4 bolsas × 50 uds.)	0030 127.730
■ 50 mL, violeta, 160 unidades (4 bolsas × 40 uds.)	0030 127.749

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com/easypet